

R

5

EXTREME RESTORATIVE PRO-AGEING SATIN SERUM

2 pc.

30 ml / 1.01 fl.oz



+



2

THERMAL-VIBRATION FACE MASSAGING DEVICE

FOR EXTERNAL USE ONLY

Velvety serum designed to provide the skin with deep moisturization and an immediate plumping effect. It contains Hyaluronic Acid, combined with the nourishing and emollient action of vegetable oils. After application, the skin is smooth, plumped, and toned. Excellent for reducing deep wrinkles on the face and around the eye area.

DIRECTIONS: The **R5** serum has been specifically formulated to be applied using the **D2** Thermal-Vibration Face Massaging device, which, in addition to facilitating penetration of the product into the deepest layers of the skin, intensifies the serum's effects. To apply the **R5** serum with the **D2** device, carefully read the instructions inside.

Siero caratterizzato da una texture raffinata e morbidevolmente vellutata. La formula è stata studiata per fornire alla pelle un immediato effetto "plumping" e una forte azione idratante. Il prodotto contiene Acido Ialuronico cui si associa l'effetto nutriente ed emolliente degli oli vegetali. Dopo l'applicazione, la pelle risulta distesa e tonica. Ottimo per attenuare le rughe più marcate presenti su viso e contorno occhi.

Modalità di utilizzo: Il siero **R5** è stato studiato appositamente per essere applicato con l'ausilio del dispositivo **D2** (Thermal-Vibration Face Massaging Device) che, oltre a facilitarne la penetrazione negli strati più profondi della cute, ne intensifica l'azione. Per utilizzare il siero **R5** con il dispositivo **D2**, l'uso del dispositivo è molto facile.



OUR RAW MATERIALS ARE PURE, CERTIFIED OF BIOTECHNOLOGICAL OR PLANT-BASED ORIGIN AND ARE THE MOST INNOVATIVE AVAILABLE TODAY. ALL MISULA PRODUCTS COMPLY WITH THE MOST STRINGENT EUROPEAN SAFETY REGULATIONS, AND THEY ARE REGISTERED ON THE EUROPEAN COSMETIC PORTAL.

INGREDIENTS (INCI/CTFA):

Ethylhexyl Palmitate, Octyldodecanol, Isoamyl Laurate, Isododecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocos Nucifera (Coconut) Oil (Organic Origin), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glyceryl Behenate, Argania Spinosa Kernel Oil (Organic Origin), Silica Dimethyl Silylate, Hydrogenated Vegetable Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (Organic Origin), Isoamyl Cocotate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Tocopheryl Acetate, Nylon-6, Behenyl Alcohol, Tribehenin PEG-20 Esters, Parfum (Fragrance), Lecithin, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Xylose, Trihydroxystearin, Hexyl Cinnamal, Curcuma Longa (Turmeric) Root Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract*, Tocopherol, Alpha-Isomethyl Ionone, Ascorbyl Palmitate, Linalool, Sodium Hyaluronate, Coumarin, Ubiquinone, Limonene, Citric Acid, Geraniol, Citronellol, Citral, Amorphophallus Konjac Root Powder, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Isoeugenol.

HOW TO OPERATE: Charge the device for approximately 8 hours before use. To charge the device, use the USB charging base.

Assicurarsi di aver ricaricato il dispositivo per circa 8 ore prima dell'utilizzo. Per caricare il dispositivo, utilizzare la base di ricarica USB.




R5 (Extreme Restorative Pro-Ageing Satin Serum)

Made in Italy by: Maylea S.r.l. Via Negri, 4 Trezzano sul Naviglio - Milano - Italy | info@misulacosmetics.com - www.misulacosmetics.com

D2 (Thermal Vibration Face Massaging)
Made in PCR for: Maylea S.r.l. Via Negri, 4 Trezzano sul Naviglio - Milano - Italy | info@misulacosmetics.com - www.misulacosmetics.com

PHASE 1

Thoroughly cleanse and dry face, neck and décolleté. Put a small amount of **R5** serum onto the conductor (fig.1) in order to facilitate the movement of the device on your face during the skin pre-warming phase. N.B.: All **MISULA** serums and creams use an airless dispenser which provides the correct amount of product for a single use. To dispense the **R5** serum, simply twist the top of the tube; the movement will push the nozzle and button out. With the dispenser facing upwards, lightly push the button to dispense the correct amount of product. Always store product in a vertical position, with the dispenser facing upwards. Detergere e asciugare con cura viso, collo e décolleté. Applicare una piccola quantità di siero **R5** sul conduttore (fig.1) per facilitare il movimento del dispositivo sul viso durante la fase di pre-riscaldamento della pelle. Nota: Tutti i sieri e le creme **MISULA** utilizzano un dosatore airless che fornisce la quantità di prodotto necessaria per un singolo utilizzo. Per erogare il siero **R5**, ruotare semplicemente l'estremità del tubetto; il movimento fa fuoriuscire dalla loro sede sia il fustello che il pulsante di erogazione. Una leggera pressione sul pulsante eroga la giusta quantità di prodotto.

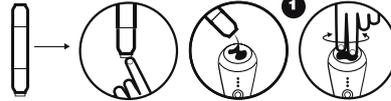


RoHS COMPLIANT




PHASE 2

Press the "on" button for 3 seconds (fig.2). You will hear a beep and the warming function light will come on (fig.3) This means that the device is on and therefore you can start to gently pre-warm your face, forehead, neck and décolleté for about a minute. Remember to remove glasses when using the device and to never use it on damaged skin. Do not massage the same area for more than a few seconds at a time. Premere per 3 secondi il pulsante di accensione (fig.2). Si sente un segnale acustico e l'indicatore della funzione riscaldamento (fig.3) si accende. Ciò significa che il dispositivo è acceso, quindi è possibile iniziare a pre-riscaldare delicatamente il viso, la fronte, il collo e il décolleté per un minuto circa. Ricordare di togliersi gli occhiali durante l'utilizzo del dispositivo e di non utilizzarlo mai su eventuali ferite. Non massaggiare troppo a lungo la stessa zona.

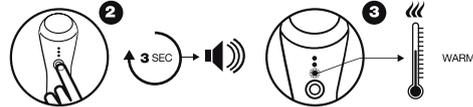

PHASE 3


Now your pores are temporarily open and your skin is ready for treatment to begin. Apply a dose of **R5** serum to your face, or more if you intend to extend treatment to your neck and décolleté, and press the "on" button again for a second (fig.4). The "thermal vibration" function light (fig.5) will come on, the device will start alternating vibration and you will hear another beep. Now you can start to gently massage your face, neck and décolleté for another minute, applying light pressure and concentrating on areas with wrinkles. Keep your eyes closed while massaging around the eye contour area. Ora, i pori sono temporaneamente aperti e la pelle è pronta per iniziare il trattamento. Applicare sul viso una dose di siero **R5**, o una maggiore quantità se si desidera estendere il trattamento al collo e al décolleté, e premere di nuovo per un secondo il tasto di accensione (fig.4). L'indicatore della funzione "vibrazione termica" (fig.5) si accende, il dispositivo inizia una vibrazione alternata e si sente nuovamente un segnale acustico. Ora è possibile iniziare a massaggiare delicatamente il viso, il collo e il décolleté per un altro minuto, applicando una leggera pressione e insistendo sulle parti rugose. Tenere gli occhi chiusi mentre si massaggia il contorno occhi.

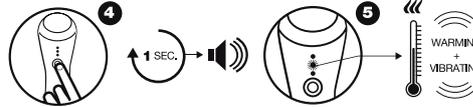

PHASE 4

Press the "on" button again for a second (fig.6). The cooling function light (fig.7) will come on and you will hear a beep. The device stops alternating thermal vibration and starts to cool down, lowering the temperature to 6°C. You will feel a very pleasant sensation: your skin will naturally react to the cold by closing its pores and all the active ingredients from the serum will be retained deep inside the skin, where they will gradually start to perform their function. Continue massaging your face for another minute.


Premere di nuovo per un secondo il pulsante di accensione (fig.6). L'indicatore della funzione raffreddamento (fig.7) si accende e si sente di nuovo il segnale acustico. Il dispositivo interrompe la vibrazione termica alternata e inizia a raffreddarsi abbassando la temperatura fino a 6 °C. La pelle reagisce in maniera naturale al freddo chiudendo i pori, donando una sensazione molto gradevole, e tutti gli ingredienti attivi del siero vengono trattenuti negli strati più profondi della cute per iniziare a svolgere la propria azione. Continuare a massaggiare il viso per un altro minuto.

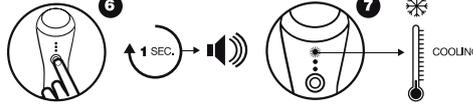

PHASE 5

Press the "on" button again (fig.8). The cooling function light (fig.9) and the thermal-vibration function light (fig.10) will come on. The cooling function will continue to work and the thermal vibration function will kick back in. Continue massaging until you hear a beep (2 minutes). The device will turn off automatically. The session is over. Gently tap your face with your fingertips to help absorb any excess serum.

Premere nuovamente il pulsante di commutazione (fig.8). L'indicatore della funzione di raffreddamento (fig.9) e l'indicatore della funzione di vibrazione termica (fig.10) si accendono. La funzione di raffreddamento continua a funzionare aggiungendo la funzione di vibrazione. Continuare a massaggiare fino al segnale acustico (2 minuti). Il dispositivo si spegne automaticamente. La sessione è terminata. Massaggiare delicatamente il viso con le punte delle dita per aiutare l'assorbimento del siero in eccesso.

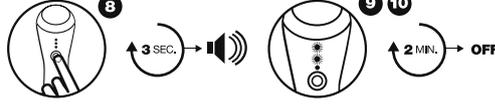

N.B.: Every selected function works for two minutes. If you exceed this time, the device will automatically turn off. If you exceed the two minutes by mistake and the device turns off, simply start from the beginning and repeat the steps until you reach the desired phase.

Nota: Ogni fase del trattamento ha un tempo limite programmato di due minuti. Dopo questo tempo, il dispositivo si spegne automaticamente. Se per distrazione sono stati superati i due minuti e il dispositivo si spegne, è possibile ripartire dall'inizio saltando i vari passaggi fino a riprendere la sequenza nel punto desiderato.

